



Kompression för dem
som följer sitt
eget mönster



NYHET

JOBST® Casual Pattern

Argyle-mönstrade
medicinska kompressionsstrumpor



JOBST®

Casual Pattern

Materialblandning med naturlig bomull och mjuk kant ger komfort som varar hela dagen



Innovativ sticksekvens ger färre tryckmärken på benen



En blandning av mjuka garner ger hög bärkomfort



Gör att luften kan cirkulera, vilket ökar följsamheten



Kompressionsstrumpan med ett **avslappnat** utseende och ett **trendigt** mönster

Ger hög komfort och trendigt utseende oavsett klädstil.

JOBST Casual Pattern-strumporna har ett snyggt argyle-mönster och tillverkas med vår unika stickningssekvens* som ger färre tryckmärken på benen än andra argyle-mönstrade kompressionsprodukter. Det mjuka garnet med hög andningsförmåga finns i tre trendiga färger och är ett alternativ till klassiska kompressionsstrumpor. Strumporna är sköna att ha på sig och det strumpliknande utseendet smälter in bra i vardagen.

Produktjämförelse efter att ha använt strumporna**



Färre lösa ändar innebär färre tryckmärken

JOBST Casual Pattern för ökad komfort: Vår unika sticksekvens hjälper till att minimera tryckmärken.

På kompressionsstrumpor med konventionella mönster gör garnet som skapar mönstret att det finns lösa ändar på insidan av strumpan. Dessa ger märken på huden efter användning.

Håll stilen i alla lägen - **naturfiber av högsta kvalitet** gör att JOBST Casual Pattern-strumporna känns lika bra på som de är snygga.

JOBST Casual Pattern kompressionsstrumpor är snygga även till ledig klädsel. Tack vare blandningen av mjuka, naturliga fibrer känns de som en vanlig strumpa. Den högkvalitativa fiberblandningen med ekologisk bomull gör att JOBST Casual Pattern är bekväma att ha på sig hela dagen.



* Ansökt om patent
** Schematiskt diagram



JOBST® Casual Pattern

En rad olika färger för den där speciella looken


Färger



Pink



Blue

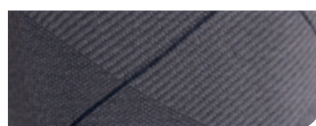

Grey

Modell



Knästrumpa



Kompressionsklass

KLASS 1: 15 - 20 mmHg

För trötta, tunga ben med en tendens att svälla och för patienter med mindre åderbräck.

KLASS 2: 20 - 30 mmHg

För åderbräck och ödem. Kan användas för tilläggshantering av ytlig tromboflebit, efter kärlkirurgi och efter skleroserande terapi.

KLASS 3: 30 - 40 mmHg

För ödem och förebyggande av återkommande venösa sår. Kan användas för att hantera kronisk venös insufficiens med dess följdverkningar, som hudförändringar och venösa sår.

Måttabell

Omkrets i cm. JOBST Casual Pattern finns i 4 unisex-storlekar och passar både kvinnors och mäns ben.

	S	M	L	XL
cC	28 - 38 cm	30 - 42 cm	32 - 46 cm	34 - 50 cm
cB	18 - 21 cm	21 - 25 cm	25 - 29 cm	29 - 33 cm

